

Lit *Ecofit*



- 4 fonctions
- Compact
- Transport facilité

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

4 fonctions électriques

HAUTEUR VARIABLE / RELÈVE-BUSTE / RELÈVE-JAMBE / PROCLIVE

Un lit parfaitement adapté aux besoins de la location à domicile et aux fonctions demandées en EHPAD

POUR LE PARTICULIER

TÉLÉCOMMANDE STANDARD



Mécanisme de glissement et d'escamotage des barrières entièrement **métallique**.



Arrimage sécurisé et fiable du sommier sur les tête et pied du lit permettant des montages / démontages rapides et efficaces.

Roues spécialement conçues de Ø 100 mm.


POUR LA COLLECTIVITÉ

TÉLÉCOMMANDE COLLECTIVITÉ



Fonction «fauteuil» : la combinaison de la proclive et de la plicature des genoux (pas de possibilité de déclive).

4 cale-matelas amovibles de série.

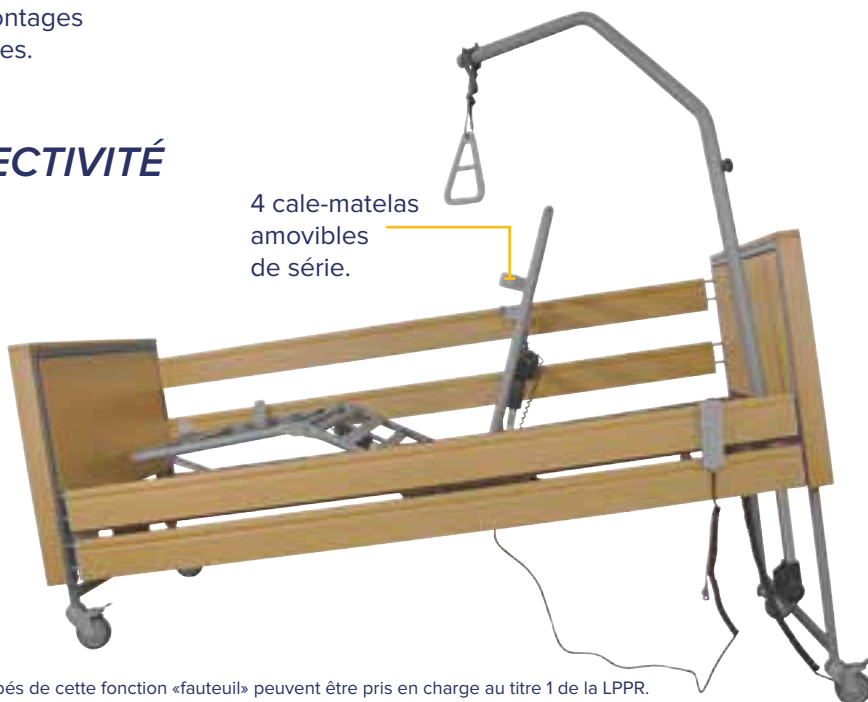

Depuis le 7/10/2014 (avis de la CNEDIMTS), les lits équipés de cette fonction «fauteuil» peuvent être pris en charge au titre 1 de la LPPR.

Un transport aisé par une seule personne

Un seul livreur peut ainsi prendre en charge un lit complet

Ecofit est livré sous le format «trolley» grâce à un kit de mise en place rapide et sans outil.

DANS L'ASCENSEUR



Maniable et très compact, **Ecofit** est facile à déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur : roues de $\varnothing$ 100 mm de série.

DANS LES ESCALIERS



Un escalier n'est plus un obstacle pour le transport des composants du lit, facilement accessibles depuis le trolley et avec **un maximum de 20 kg individuellement**.



En option

POUR LA COLLECTIVITÉ

Fonction Trendelenburg/anti-Trendelenburg (procline/décline)



Télécommande (réf : S54201000)

Les lits équipés de cette fonction ne sont pas pris en charge au titre 1 de la LPPR.

Possibilité de transporter les 4 barrières bois avec le trolley, grâce au support spécial barrières et potence. (réf : S34211400)




Panneaux cache-vérin (réf : S34207500 la paire).



Ecofit

SÉCURITÉ

- IEC 60601-2-52
- Alimentation 24 V
- Batterie de 9 V pour descente en cas de panne
- Télécommande verrouillable

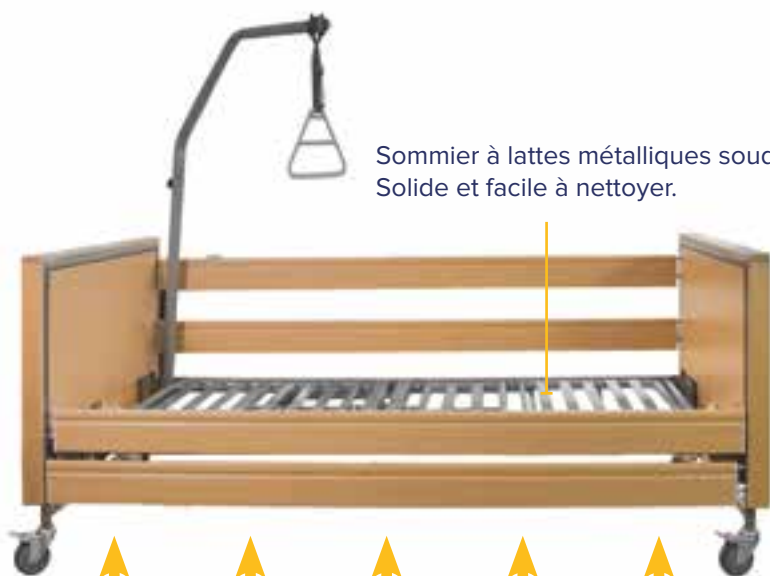

Sommier à lattes métalliques soudées.
Solide et facile à nettoyer.

Espace entièrement dégagé sous le lit, idéal
à la maison et dans les établissements



Poids maximum utilisateur : 185 kg.

Verrouillage mécanique à l'arrière
de la télécommande quel que soit
le type de télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PERFORMANCES TECHNIQUES :

- Hauteur minimum (sol/sommier) : **38,5 cm**
- Hauteur maximum (sol/sommier) : **81 cm**
- Angle maximum du relèvement-buste : **70°**
- Angle maximum du relèvement-jambes : **30°**
- Poids maximum de fonctionnement : **220 kg**
- Poids maximum utilisateur : **185 kg**
- Poids total du lit équipé
des panneaux et de la potence : **77 kg**
- Vérins électriques IPX4 : **24 V**

DIMENSIONS :

- Sommier : **90 x 200 cm**
- Longueur hors tout : **211 cm**
- Largeur hors tout : **101 cm**

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE :

Le lit **Ecofit** est conforme à l'arrêté du 12 avril 2017 paru au JORF n°0089 du 14 avril 2017, en particulier pour les fonctions proclive/déclive et fauteuil pour un usage au domicile.

Les barrières répondent intégralement à la norme EN 60601-2-52.

Il est équipé d'une alimentation électrique de Classe 2 (prise 2 fiches, sans prise de terre, avec double isolation électrique interne) OBLIGATOIRE à domicile et fortement conseillée en EHPAD et d'une télécommande verrouillable.

Structure métallique, vérins et alimentation garantis 5 ans.



Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

A 022 05 17 2

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

